



dōublo new 2.0

Double
Effect & Safety



Sistemul sinergic MFU și RF Premieră mondială

Efect terapeutic uimitor prin combinarea celor două tratamente de lifting faimoase, MFU și RF, într-un singur aplicator

Efectul Sinergic

Sinergia dintre MFU și RF


- Maximizarea rezultatului clinic și minimizarea durerii
- Are efect dublu de lifting



10 Tipuri diferite de cartușe


Tratament personalizat în funcție de tipul de piele, de zona tratată și de adâncimea dermului până la stratul de grăsime subcutanată

- FL (Ultrasunete Focalizate Liniar) 6 tipuri : față 4 tipuri, corp 2 tipuri
- SD (Punctarea Sinergică) 4 tipuri: față 3 tipuri, corp 1 tip

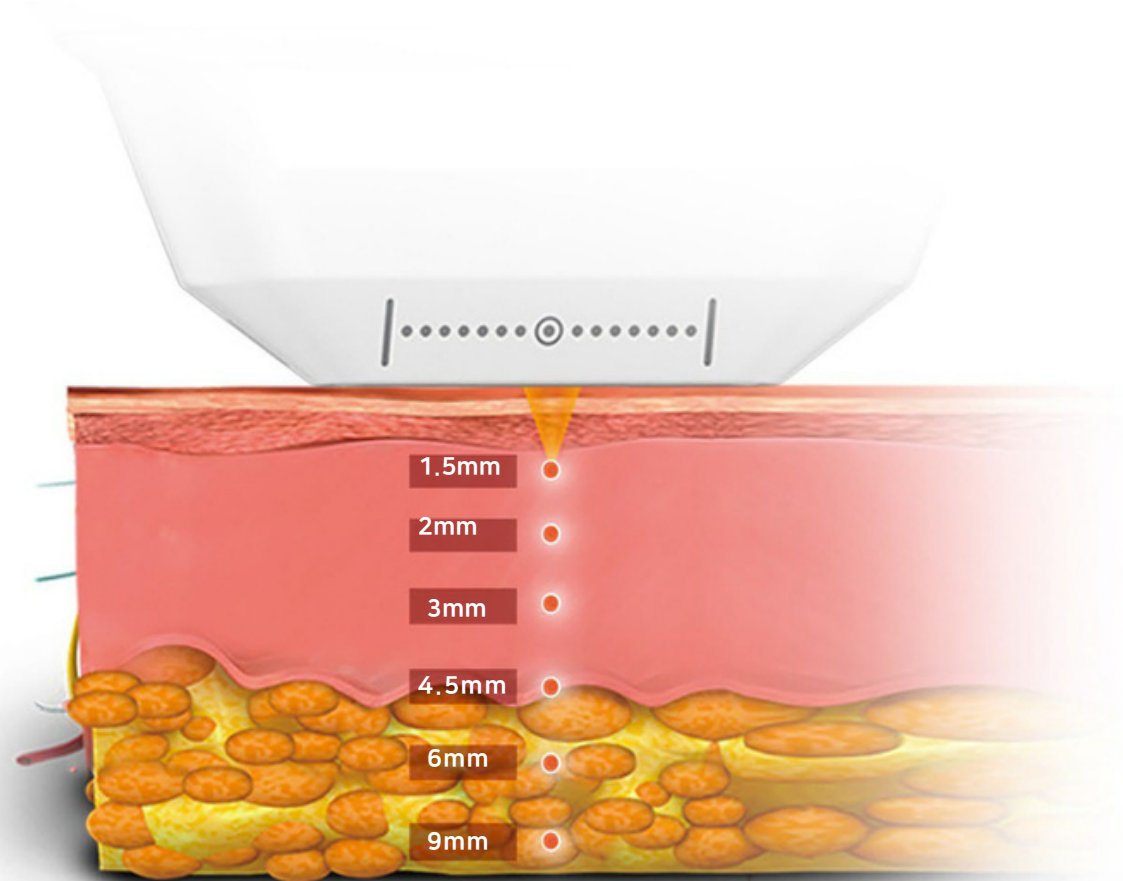


Rezultatele Tratamentelor

1 Tratamentul combinat de HIFU+RF crește activarea colagenului și a elastinei

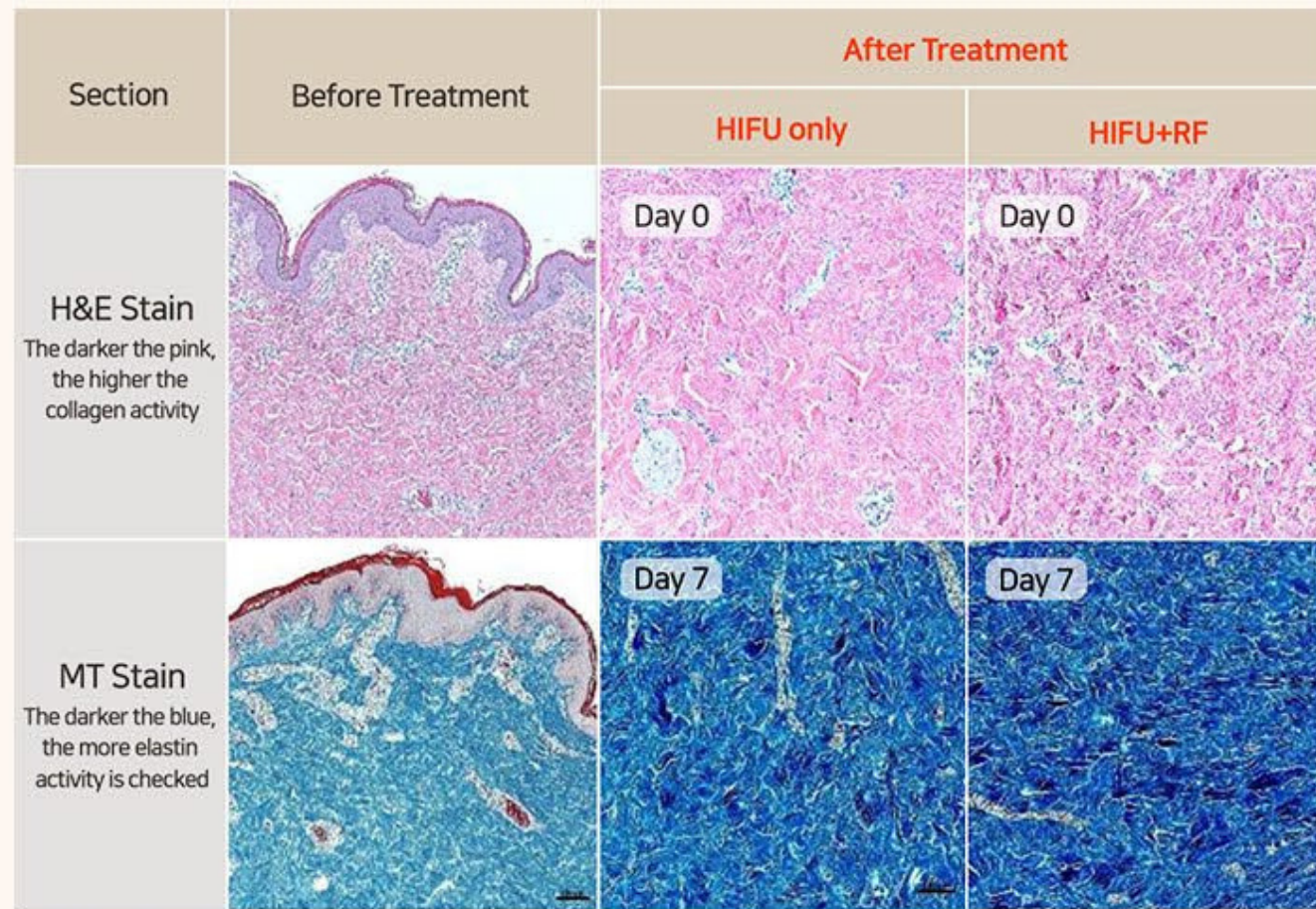

X100, scale bar: 100 μm)


2 Tratamentul combinat HIFU+RF transferă o cantitate mai mare de căldură pe o suprafață mai extinsă

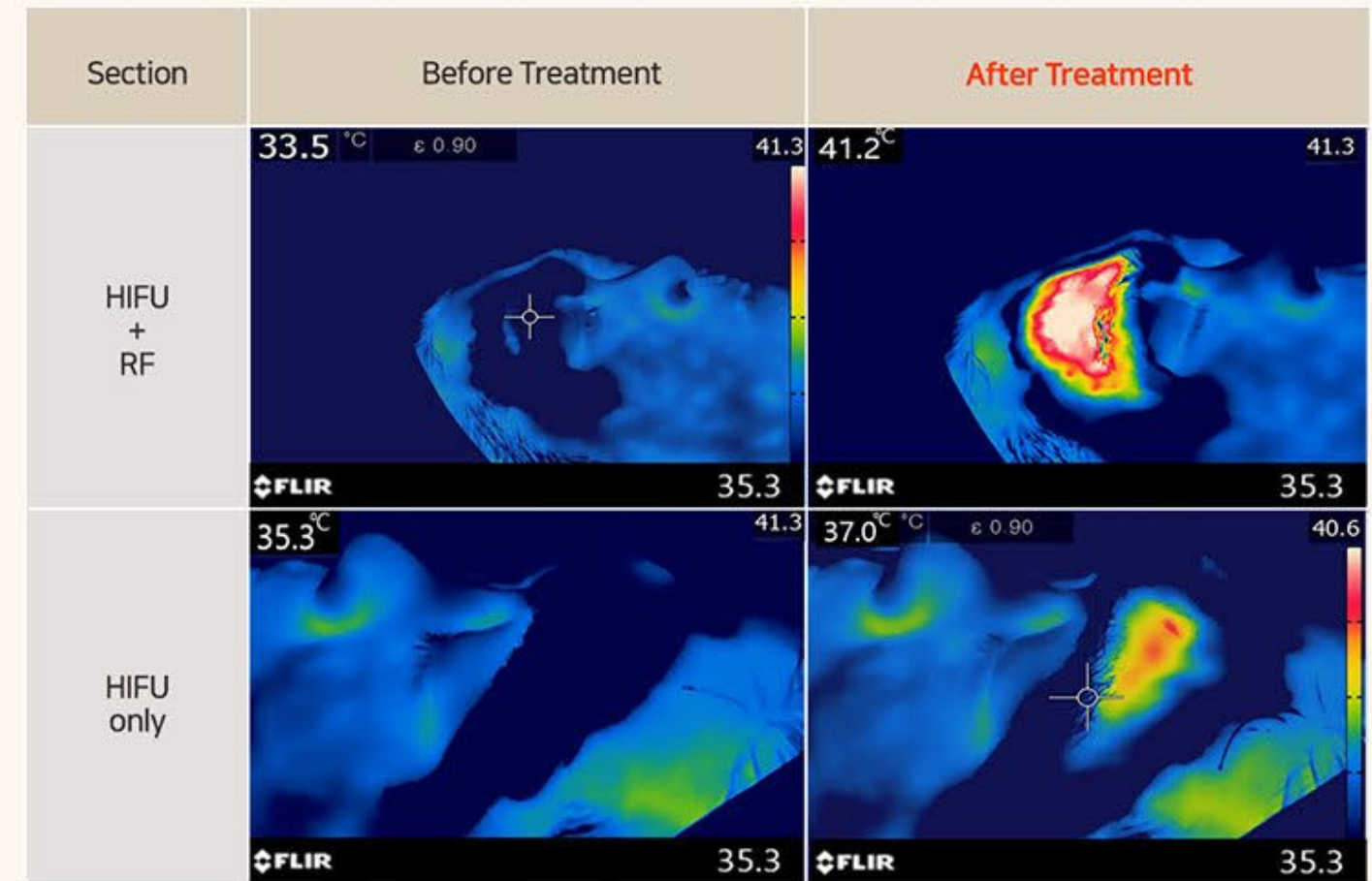

3 Tratamentele combinate HIFU+RF au ca efect o reducere de 142,9 % a ridurilor




4 Tratamentele combinate HIFU+RF prezintă o îmbunătățire de 131,3% a liniilor de expresie, comparativ cu HIFU singur

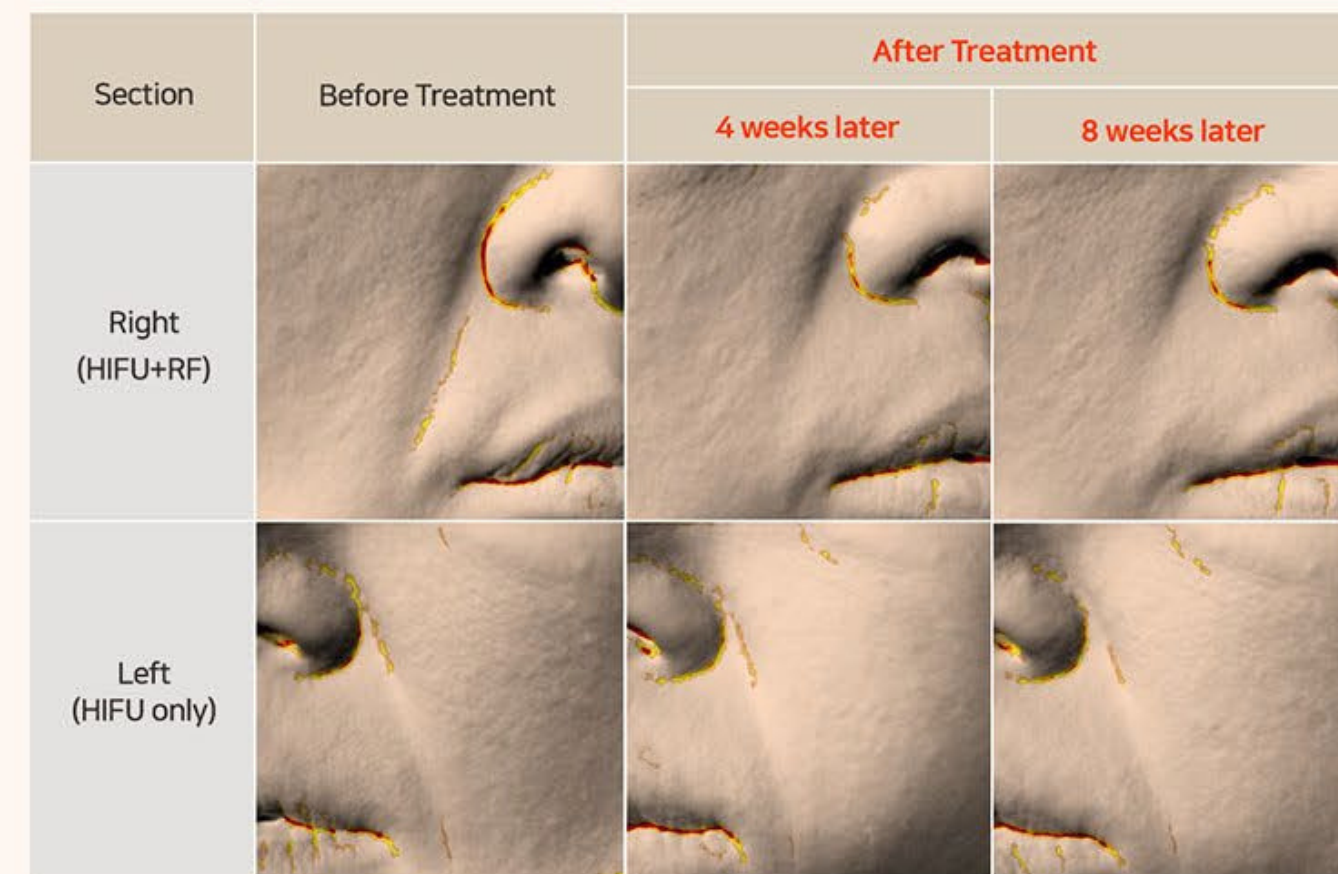


Siguranță

- **Senzor de contact FL:** Cartușul se oprește automat dacă nu intră în contact cu pielea, pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- **Senzor de mișcare FL:** Previne impulsurile consecutive în același loc, pentru a proteja pielea.

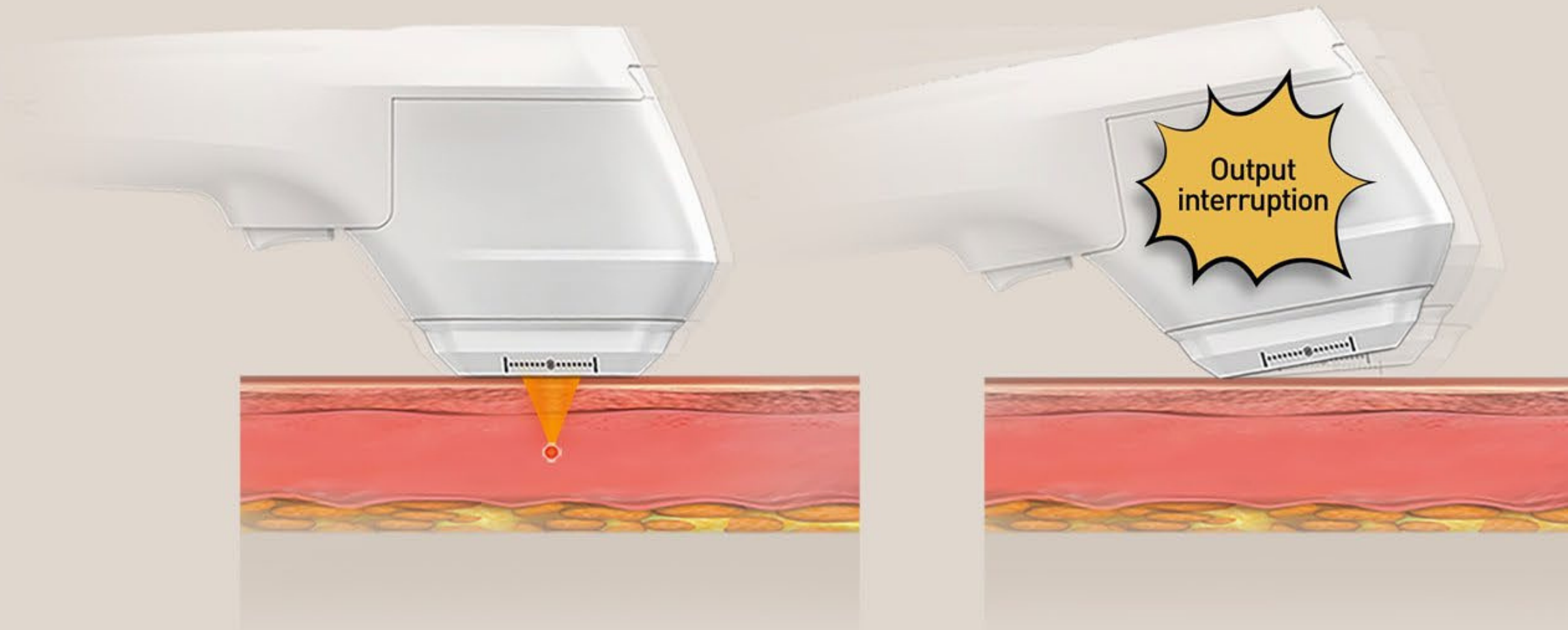

Cartușe subțiri și ușoare

Tratament convenabil și sigur al zonelor curbate și înguste

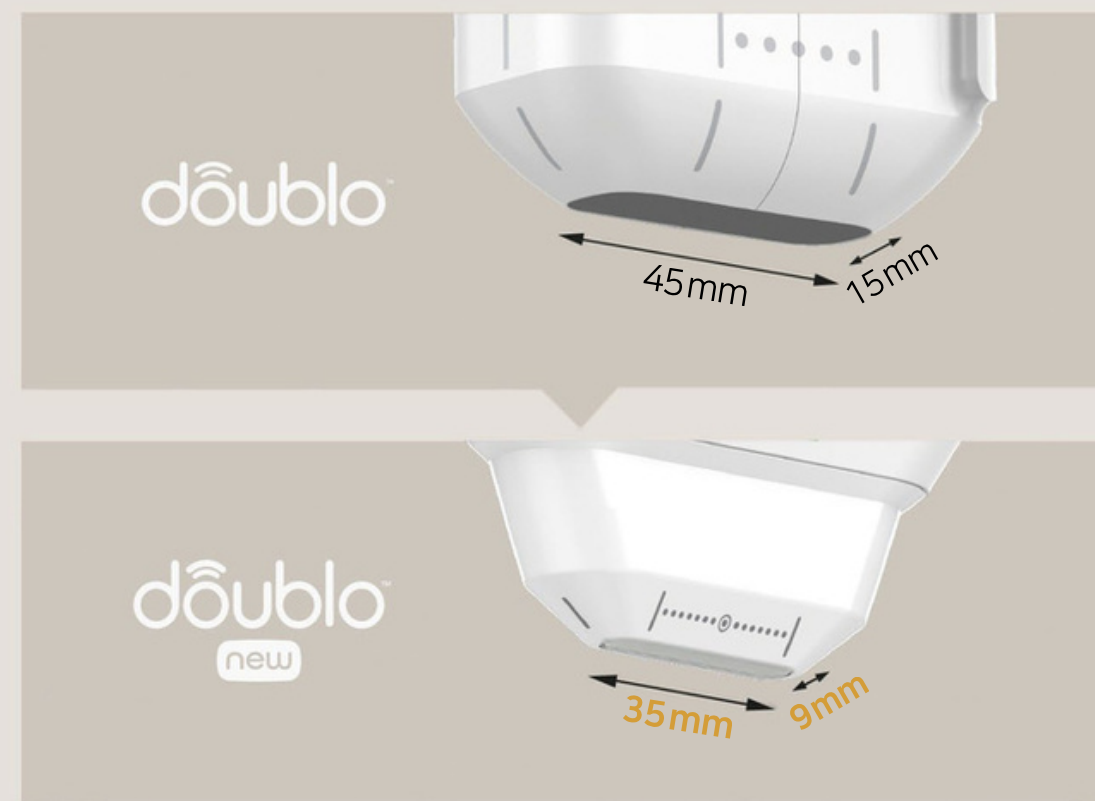


Avantaje

Aplicator cu ecran LCD

- Aplicator cu ecran LCD intuitiv care susține o setare convenabilă a energiei
- Procedură de tratament silențioasă și simplă


4 aplicatoare

- Tratament rapid cu 4 aplicatoare operative simultan, care pot fi utilizate fără a schimba cartușul

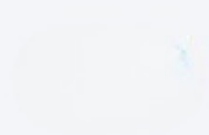

Sistem de date complex

Acest sistem oferă cel mai bun și sigur protocol de aplicare pentru fiecare pacient, pe baza datelor de tratament colectate.

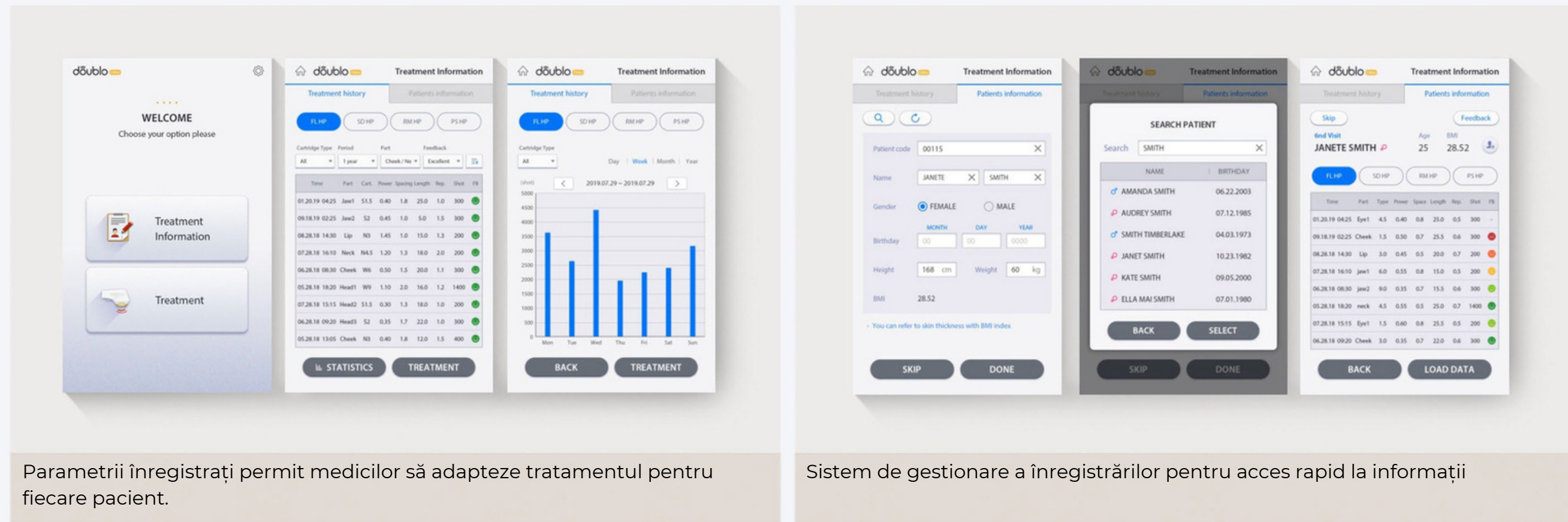

Parametrii înregistrați permit medicilor să adapteze tratamentul pentru fiecare pacient.

Sistem de gestionare a înregistrărilor pentru acces rapid la informații




- Tratamente personalizate pentru fiecare pacient
- Mod automat pentru un tratament rapid și eficient
- Mod manual pentru o flexibilitate mai mare

Profitabilitate



HIRONIC, lider mondial în tehnologia MFU, lansează noul dispozitiv **New Doublo**, care oferă tratamente mai eficiente și mai sigure

Noul dispozitiv este dezvoltat pe baza a 10 ani de experiență în tehnologia MFU de la DOUBLO, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru clinicile și centrele de estetică care doresc să ofere cele mai bune rezultate pacienților lor.

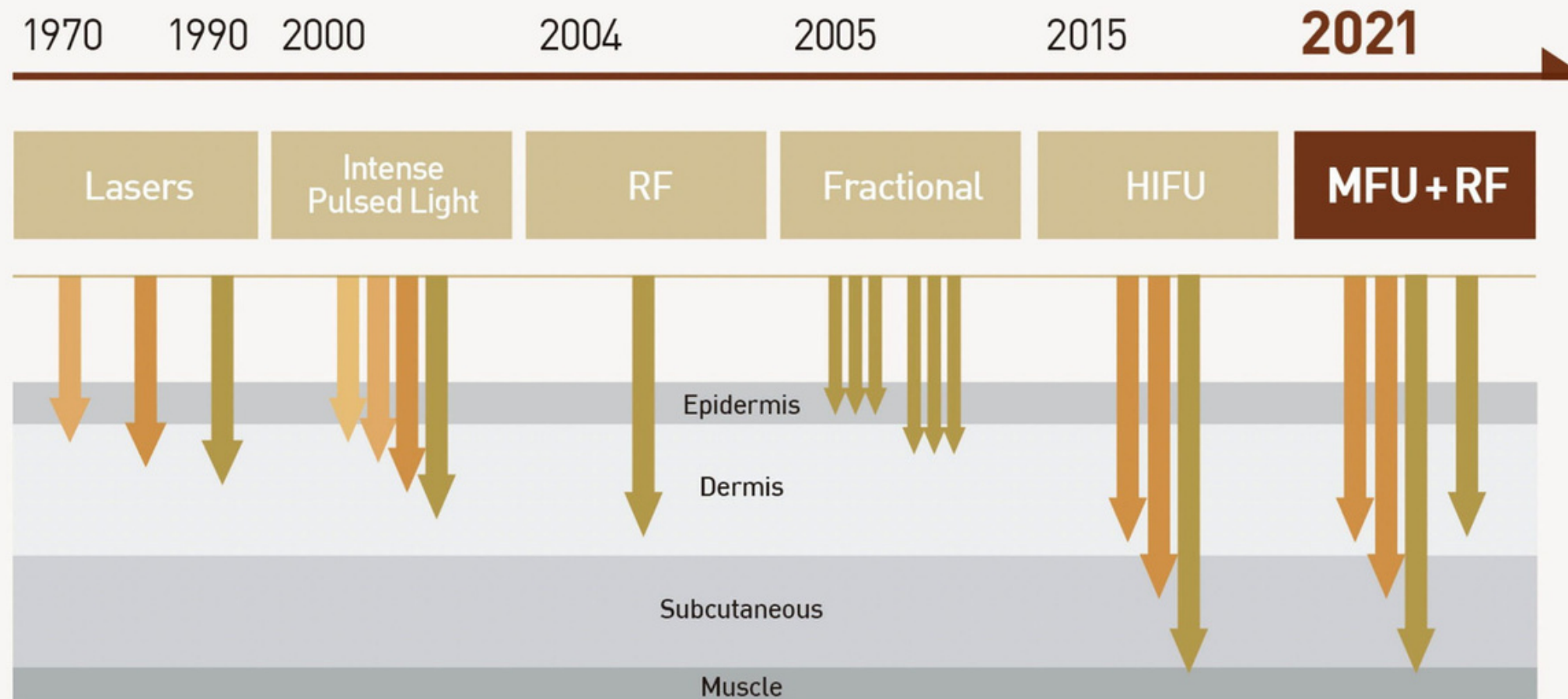· Technology trend



Specificații tehnice

 Cartuș FL	MFU	Adâncime (Frecvență, Putere)
		1.5mm (7MHz, 0.1J~0.5J)
		2.0mm (7MHz, 0.1J~1.0J)
		3.0mm(7MHz, 0.1J~1.0J)
		4.5mm(4MHz,0.1J~1.5J)
		6.0mm(2MHz,0.1J~3.0J)
		9.0mm(2MHz, 0.1J~3.0J)
		Număr total impulsuri 12.000 shot
 Cartuș SD	MFU	Adâncime (Frecvență,Putere)
		1.5mm (7MHz, 0.1J~0.5J)
		3.0mm(7MHz, 0.1J~1.0J)
		4.5mm(4MHz,0.1J~1.5J)
		9.0mm(2MHz, 0.1J~3.0J)
	Număr total impulsuri 12.000 shot	
	RF	Frecvență 2MHz/Nivel1~10
		Număr total puncte 120.000 dot

	Spațiere	1.0~5.0 mm
	Lungime	5.0~25mm (1.0mm)
	Dotări	Aplicator dotat cu ecran LCD
		4 aplicatoare
		Sistem informatic pentru tratamente
		Sistem de mentenanță de la distanță
		Mod Automat și Mod Manual
		Senzor automat pentru aplicator
		Interfață grafică intuitivă
		Ecran LCD 12.1"
General	Consum de Energie	AC100-240V,50/60Hz
	Dimensiuni	700x605x1315
	Greutate	43.5kg



Doc.❤️landia

ESTETICA

0735 613 948

estetica@doclandia.ro

www.doclandia.ro/estetica